

RAIOS-X AXR

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.

**TECNOLOGIA
LIGHT GREEN**
95% MENOS CHUMBO



**A MAIS ALTA
TECNOLOGIA
REVELADA
EM CADA
DIAGNÓSTICO**


Imagem ilustrativa.

RAIOS-X AXR

REVELA O MELHOR DE VOCÊ

Mostrar a seu paciente que você possui alta tecnologia, transforma a imagem que ele tem de seu atendimento. Escolha o único Raio-X do Brasil com exclusiva tecnologia Light Green, com 95% menos chumbo para assegurar máxima proteção saúde.

ANVISA: 10069210087

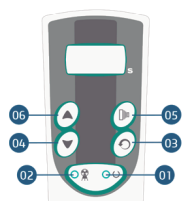

DISPLAY

- 01 | LED Verde
- 02 | LED Amarelo
- 03 | Reiniciar
- 04 | Diminuir
- 05 | Disparador
- 06 | Aumentar

**PRODUTO
PRONTO
PARA O SISTEMA
DIGITAL**



A MAIS ALTA TECNOLOGIA

Extremamente leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação, permite uma movimentação suave, precisa e com excelente estabilidade.

Tecnologia Light Green

95% menos de chumbo no cabeçote dos Raios-X, reduzindo o impacto no meio ambiente.

Seleções e ajustes de tempo digital e analógico
Tempos pré-programados opcionais disponíveis no controle do aparelho, de acordo com a necessidade.

Tempos pré-programados

20 tempos pré-programados para aplicações distintas, conforme o tipo de paciente, receptor radiográfico ou posição do dente.

Intervalos de tempo

25 intervalos de tempo de exposição padronizados - permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0.06 segundos.

Reprogramação dos tempos


O profissional pode inserir e gravar novos tempos desejados.

A TECNOLOGIA QUE VOCÊ CONFIAR NO TAMANHO QUE VOCÊ PRECISA




RAIO-X PAREDE

Possibilita a máxima
otimização dos espaços

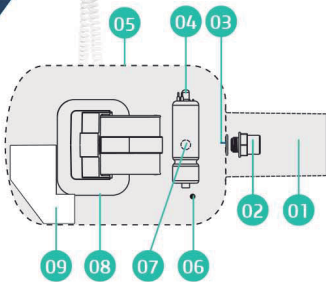


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONJUNTO EMISSOR

- 01 | Filtro de alumínio(1mm a1)
- 02 | Colimador
- 03 | Anel vedação do colimador
- 04 | Tubo de raios-x
- 05 | Capa externa
- 06 | Óleo isolante
- 07 | Ponto focal
- 08 | Bobina alta tensão
- 09 | Conjunto Placa eletrônica

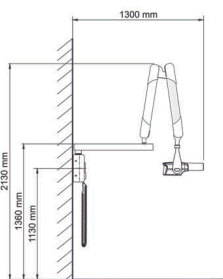

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSIONAL (MM)

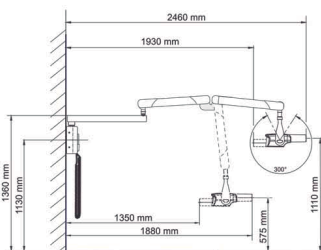

RAIOS-X PAREDE PANTOGRÁFICO

Possibilita aproximação total
do campo operatório

RAIOS-X COLUNA MÓVEL

Permite mobilidade
com longo alcance



ANVISA: 10069210087 - JANEIRO - 2022 | COD. 51000000200

SOLICITE
ORÇAMENTO



RAIOS-X



saevo.com.br



@saevo_oficial



saevoweb

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.