

CONSULTÓRIO S 400 F

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.

EVOLUA SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

O S 400 é um consultório que reúne conforto e tecnologia para a melhor experiência do cirurgião-dentista



Imagem ilustrativa. Confira lista de opcionais no verso.


CONHEÇA O S 400

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado
- 2 Braço de apoio rebatível em 90°
- 3 Estofamento com 15 opções de cores
- 4 Pedal de comandos Joystick
- 5 Base com debrum antiderrapante
- 6 Dispensa fixação no piso
- 7 Permite acoplamento de até 6 terminais
- 8 Manômetro para visualizar a pressão do ar e alimentação do equipo
- 9 Bandeja de apoio para instrumentais
- 10 Hastes retráteis com trava (no equipo H)
- 11 Equipo com braço pneumático
- 12 Unidade de água rebatível a 60° Porta-copo e sensor de proximidade
- 13 Refletor Sirius LED - 3, 5 ou 3x2 LEDs com sensor de proximidade*
- 14 Mocho Ergonomic*

CONFIRA NO VERSO A LISTA DE
ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

*Opcional.

CONSULTÓRIO S 400 H

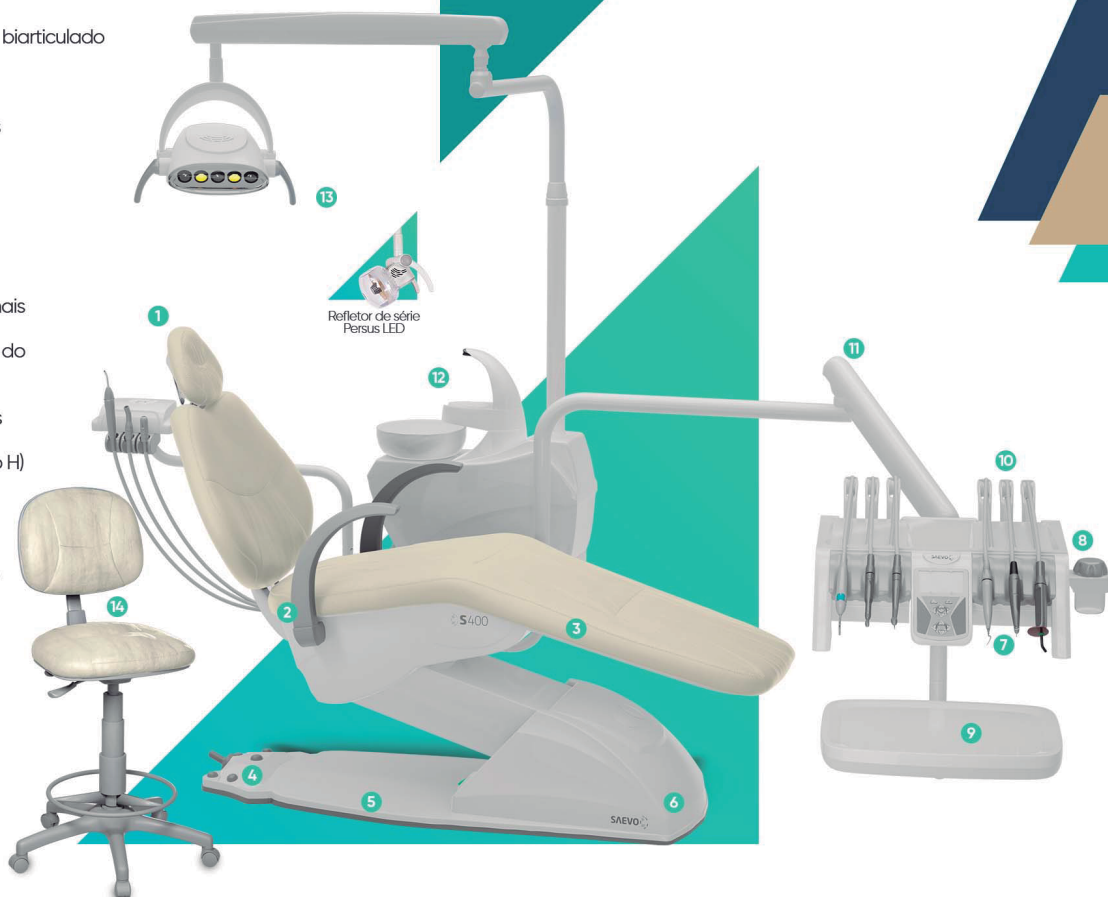

REFLETOR SIRIUS SENSOR 3X2 LEDS

Faça um upgrade para o 3x2 LEDS e ganhe mais tempo para o trabalho clínico com materiais fotossensíveis



Permite a utilização da **luz Orange (laranja)** durante os procedimentos clínicos com **materiais fotoativados**, proporcionando mais tempo de manuseio dos mesmos evitando a **polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais fotoativados**

Intensidade máxima da luz: 35 mil LUX

CORES SAEVO

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

PVC OU VISCOELÁSTICO*



Verde Escuro



Ouro



Gris



Laranja



Prata



Azul Marinho



Angra



Celeste



Desert Rose



Nozes

COURO*



Terracota



Nero



Marine



Carrara



Nozes

*Opcional. Imagem ilustrativa.

SÉRIE/OPCIONAIS

Confira o que acompanha o seu **S 400**

N: NÃO SE APLICA | O: OPCIONAL | S: SÉRIE

CONSULTÓRIO	F	H
Posição de Trendelenburg	N	N
Sistema de Massagem	N	N
Estofamento Laminado PVC	S	S
Estofamento Viscoelástico	O	O
Estofamento Couro	O	O
Encosto Cabeça Removível	N	N
Encosto Cabeça Biarticulado	S	S
Braço Cadeira 2 Fixos	N	N
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível Lateral	S	S
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível e Pneumático	N	N
Protetor dos Pés	S	S
Pedal (7 teclas - 3 PT, PO, RF, ASS, EN)	N	N
Pedal Joystick (5 teclas - 3 PT, PO, RF, PC, BM)	S	S
Pedal Joystick (5 teclas - 3 PT, PO, RF, PC, BM) com Função Chip Blower	N	N
Pedal com Função Chip Blower (Móvel - 4 PT, PO, RF, PC, BM)	N	N
Soft Comfort	O	O
Caixa de ligação avulsa	O	O
Ambidestro	O	O

EQUIPO	F	H
Braço com Trava Pneumática	S	S
Kit Cabos Elétricos	S	S
Tampo de Inox	N	N
Bandeja Superior Equipo (Acrílico)	S	N
Bandeja Inferior Equipo (Injetada)	N	S
Kit PAD (Comandos Eletrônicos)	S	S
Kit Negatoscópio	S	S
Kit Flush	O	O
Manômetro	S	S
Terminal de Alta Rotação	S	S
Terminal de Baixa Rotação sem Spray	N	N
Terminal de Baixa Rotação com Spray	S	S
Seringa Tríplíce	S	S
Seringa Tríplíce Injetada	N	N
Kit Aquecedor Seringa Equipo	O	O
Quantidade de terminais no equipo	ATÉ 6 (3S e 3o)	ATÉ 6 (3S e 3o)
Kit Micromotor Elétrico	O	O
Kit Terminal Borden com Spray	O	O
Kit Terminal Fibra Óptica	O	O
Kit Fotopolimerizador	O	O
Kit Ultrassom	O	O
Kit Jato de Bicarbonato	O	O

UNIDADE DE ÁGUA	F	H
Kit Porta-copo com Sensor	S	S
Kit Porta-copo sem Sensor	N	N
Acionamento Elétrico Água da Bacia	S	S
Kit Alcance sem PAD	O	O
Kit Alcance com PAD	O	O
Kit Sugador Venturi	S	S
Kit Sugador Vac Plus	O	O
Kit Sugador BV	O	O
Kit Seringa Tríplíce	O	O
Kit Seringa Tríplíce Injetada	N	N
Kit Aquecedor Seringa UA	O	O

REFLETOR	F	H
Persus L (Halógeno)	N	N
Persus Led	S	S
Sirius Sensor 3 Leds	O	O
Sirius Sensor 5 Leds	O	O
Sirius Sensor 5 (3x2) Leds	O	O

OUTROS	F	H
Kit Multimídia (Suporte e Monitor)	O	O

SOLICITE ORÇAMENTO



Os Consultórios Odontológicos S400 F e S 400 H, são compostos por:
Cadeira Syncrus G2 - ANVISA: 10069210062
Equipo Syncrus G8 FE - ANVISA: 10069210075
Equipo Syncrus G8 HE - ANVISA: 10069210075
Unidade de Água Syncrus G3 - ANVISA: 10069210063
Refletor Persus LED, Sirius G8 Sensor 3 Leds, Sirius G8 Sensor 5 Leds;
Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds - Anvisa: 10069210069
JANEIRO - 2022 | COD. 51000000212



saevo.com.br



@saevo_oficial



saevoweb

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.